



# スミロン コンパニオンプレート (セルカルチャーインサート用)




各メーカー(下記)のインサートの嵌合が可能

- ・培地交換等プレートを傾けた際でもインサートが安定
- ・自動培養装置などへの適用にも好適





取扱販売店  
**SEIKO**  
正晃株式会社

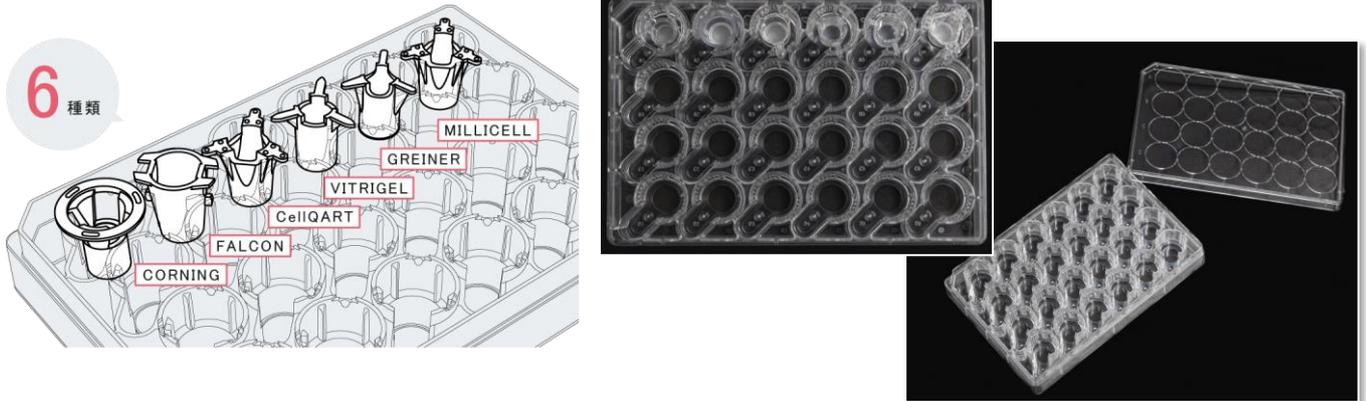

ピペットチップ先端が入るスペースを設置、  
培地交換時のインサートの取り出し不要

- ・細胞への振動や衝撃のストレスを回避
- ・簡便に培地交換が可能

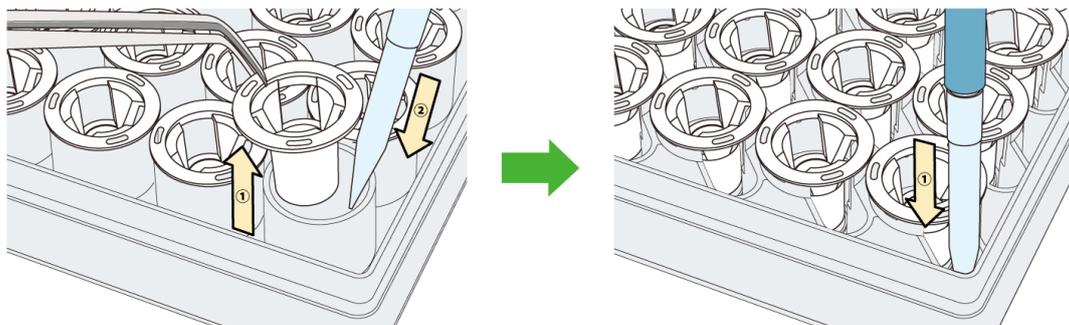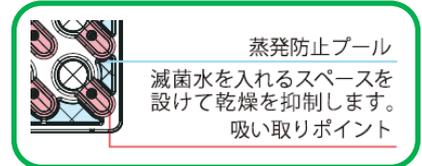

プレートを傾け、培地を交換



プレート底面は細胞接着培養処理、  
アピカル側/ベーサル側での共培養が可能

保管温度: 室温

放射線滅菌済


製品名	品番	サイズ	入り数	参考価格
SUMILON® Companion Plate for CellCulture Insert	MS-80240C	127.5×85.5×21.1(H)mm	12個/ケース	27,600円 (税別)

## ☑ その他、機能性を考慮した様々な工夫




・ウェル底面周囲の溝構造による毛細管力で、  
培地をほぼ全量交換が可能

・全体の底面積  
(ウェル底面+培地交換ポート底面)が  
一般的な24ウェルプレートとほぼ同様(187.5mm<sup>2</sup>)

・ウェル側面の段差構造で、ウェル/インサート隙間の毛細管現象  
による液面上昇を抑制

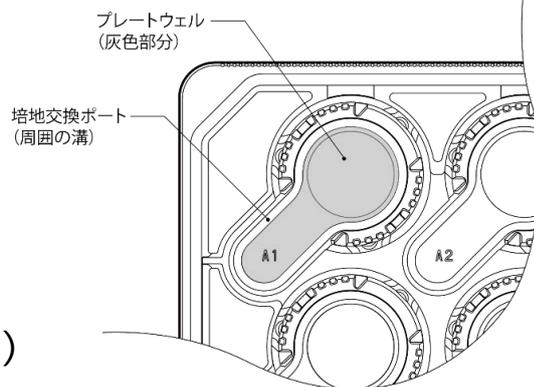

## 【各メーカーインサートの 設置イメージ】

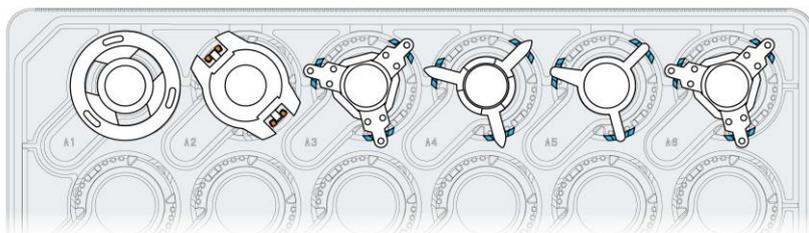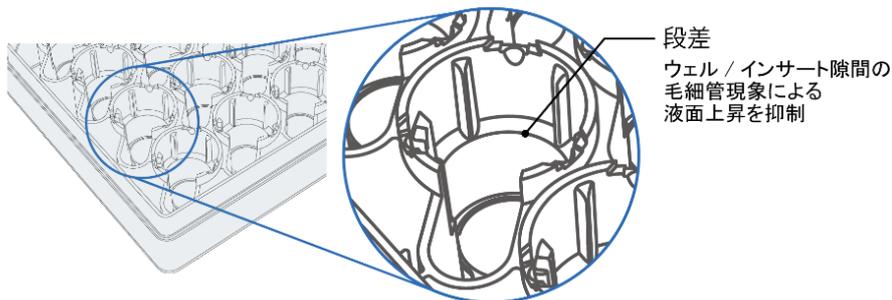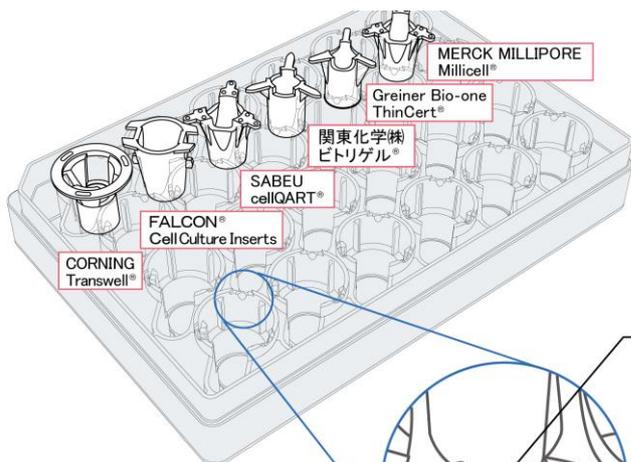

注：説明用にプレートに色を付けています。

三箇所突起があるインサートについては  
専用の段差の位置にセットして下さい。

- 段差 A
- Greiner Bio-one ThinCert®
  - 関東化学株式会社 ビトリゲル®

- 段差 B
- MERCK MILLIPORE Millicell®
  - SABEU cellQART®

## 【各部寸法情報】



## 【ご使用方法動画】



## 【各部寸法情報】

<https://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/cell-culture/companion-plate/index.html>

## 【ご使用方法動画】

<https://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/cell-culture/companion-plate/movie/index.html#movie>

## 住友ベークライト株式会社

■ S-バイオ事業部 マーケティング・営業部  
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル  
【東日本エリア】TEL:03-5462-4831 FAX:03-5462-4835  
【西日本エリア】TEL:06-7669-0031 FAX:06-7223-8691  
■ E-mail: s-bio.inquiry@ml.sumibe.co.jp  
■ URL : http://www.sumibe.co.jp

取扱販売店



SEIKO

## 正晃株式会社

福岡第一営業所 (092)611-8131	大分営業所 (097)558-0025	長崎営業所 (0957)49-2780
福岡第二営業所 (092)611-5335	佐賀営業所 (0952)22-7841	沖縄営業所 (098)888-3666
福岡西営業所 (092)330-6060	熊本営業所 (096)380-0055	山口営業所 (083)972-0215
北九州営業所 (093)671-8006	宮崎営業所 (0985)27-1331	下関配送センター (083)248-3862
久留米営業所 (0942)45-1331	鹿児島営業所 (099)260-7133	東京支店 (03)5947-6680